

PREMIUM GOLD BLOCK

KIT ECOGÊNICO DE BLOQUEIO E ESTIMULAÇÃO COM GROVE SONOVISÍVEL

O KIT MAIS COMPLETO DO MERCADO



Apresentação e Tamanhos:

- 1 Injetor Graduado Ergonômico 12ml
- 2 Cânulas de Bloqueio e Estímulo com Grove Sonovisível
- 1 Manifold para Distribuição de 3 vias
- 1 X-Tape Tela Adesiva Radiopaca com 196 nichos
- 1 Luer Duplo

Medidas das Cânulas: 50 x 21G, 100 x 21G e 150 x 21G


Tamanho X-Tape: 15 x 15 cm

Distância da linha: 1 cm



PREMIUM GOLD BLOCK

Kit ecogênico de bloqueio e estimulação com grove sonovisível.

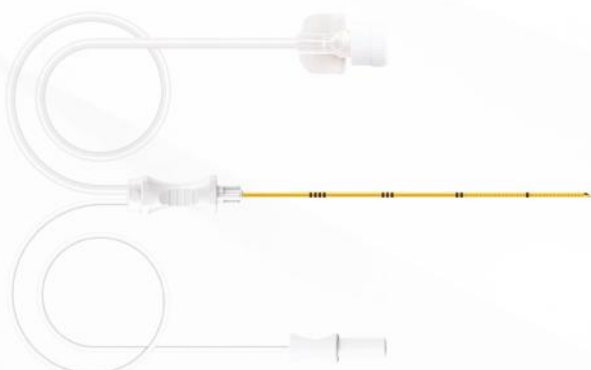

Cânulas de Bloqueio e Estimulo com Grove Sonovisível



Injetor Graduado Ergonômico 12ml




Luer Duplo



Manifold

- ✓ Tela adesiva X-Tape radiopaco, localização e posicionamento rápido, com significativa redução no tempo de procedimento e com menor tempo de exposição à radiação. 196 nichos de localização, permite maiores áreas.
- ✓ Cânula de estimulação, para bloqueios simultâneos de nervos periféricos, graduadas e revestidas em teflon, possibilitando serem guiadas por ultrassom.
- ✓ Grove Sonovisível, permite a fácil visualização da Ponta ecogênica em formato bisel através do ultrassom ou fluoroscopia, menos traumática na inserção da cânula e menor dor residual do procedimento.
- ✓ Cânula graduada permite confirmação visual da profundidade do acesso.
- ✓ Luer Duplo: Injeção bilateral simultânea.
- ✓ Material de uso único, estéril.

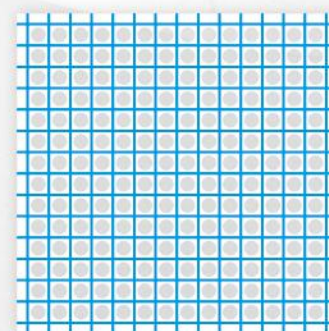

X-Tape Tela Adesiva Radiopaca

REGISTRO ANVISA: 81471639003



+55 11 2897-5200

comercial@otimaindustria.com.br

otimaindustria.com.br

Representante: